



# 使用 Cologuard<sup>®</sup> 篩查結腸癌

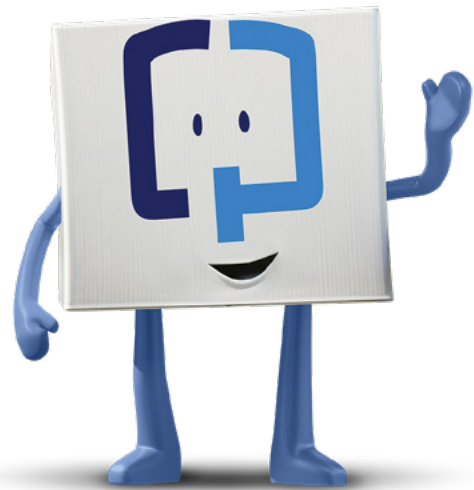

  
**cologuard<sup>®</sup>**  
by EXACT SCIENCES

Cologuard 旨在篩查年齡在 45 歲及以上的成人，這一年齡段的人普遍存在結直腸癌風險。僅憑處方銷售。

請參閱傳單背面的重要風險資訊。

## 透過結腸癌篩查 管理您的健康

結腸癌影響所有種族、性別和民族<sup>1</sup>

第三大

這種癌症是男性和女性第三大最常見的癌症，通常被認為是最可以預防但預防最少的一種癌症<sup>2, 5</sup>

45 歲以上

由於結腸癌在 50 歲以下的人群中呈上升趨勢，美國癌症協會 (American Cancer Society) 現在建議從 45 歲開始篩查<sup>3</sup>

90%

請記住此指引。因為若在早期發現，大約 90%<sup>\*</sup> 結腸癌是可治癒的<sup>4</sup>


這就是在您常規健康檢查時應及時做結腸癌篩查的原因！

<sup>\*</sup>基於 5 年存活期。

## 瞭解您的篩查結果

您的醫療保健提供者將在實驗室收到樣本後約 2 週為您提供檢測結果

請記住，Cologuard 篩查糞便中 **DNA 及血流** 的變化，然後基於這些標記物得出篩查結果<sup>5</sup>

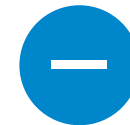

陰性結果表示化驗未檢測到這些潛在徵象。您不太可能患有結直腸癌<sup>5, 6</sup>



陽性結果表示檢測到這些潛在徵象。務必知悉陽性結果**並非**等同於確診癌症<sup>5</sup>

假陽性和假陰性確實時有發生，因此請聯絡您的醫療保健提供者討論您接下來該怎么做<sup>5</sup>


想瞭解更多資訊？請瀏覽  
[Cologuard.com/UnderstandingResults](https://Cologuard.com/UnderstandingResults)  
從中獲取更多詳細資訊並觀看我們的影片

## Cologuard 易於 使用且價格親民

Medicare 和大多數大保險公司健康保險皆涵蓋 Cologuard。大多數有保險的患者**無需自行承擔任何費用**<sup>\*6</sup>

在全國範圍內，**94%** 以上的 Cologuard 患者**無需為篩查自付任何費用**<sup>\*6</sup>

<sup>\*</sup>Exact Sciences 最近基於患者賬務歷史記錄所做的估計。

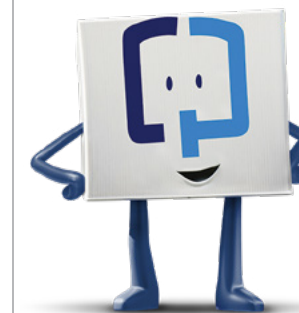

瞭解更多資訊

關於保險請瀏覽

[Cologuard.com/insurance](https://Cologuard.com/insurance)

我們可幫助您聯絡您的保險公司，諮詢與此相關的問題。請致電

**1-844-870-8870**



## 撕下這張幫助提醒您寄還 Cologuard 套件的提醒便箋

把它貼在您通常粘貼提醒便箋之處——比如您的淋浴間裡或冰箱上。



致電  
1-844-870-8870\*  
或前往  
Cologuard.com  
線上聊天



前往  
Cologuard.com/use  
觀看《如何使用》  
影片

\*提供 200 多種語言的口譯服務

請於以下時間之前寄回您的套件：



## 如何使用 Cologuard 套件



收到套件後，請拆開包裝並閱讀內附的《患者指南》



將收集容器放入坐便器支架



向收集容器內排便



用試管刮取樣本



在收集容器中加入防腐劑



務必填妥兩個標籤



現在，只需把託運箱交給 UPS® 就可以了。請參閱本傳單下一頁中的重要託運資訊

## 寄出 Cologuard 套件

使用預付費 UPS® 運單標籤在收集樣本後的當日或第二天將套件寄還給 Exact Sciences Laboratories

確保樣本寄回不會因週日或公休日造成拖延

有兩種免費寄回途徑可供選擇：

第 1 種：

前往 [Cologuard.com/UPS](https://Cologuard.com/UPS)  
線上安排 UPS 上門收件或致電  
1-844-870-8870 尋求幫助

第 2 種：

將套件投遞到 UPS 地點。瀏覽  
[Cologuard.com/UPS](https://Cologuard.com/UPS) 查找當地  
可供選擇的投遞地點及營業時間

## 適用範圍及重要風險資訊

Cologuard 旨在透過檢測糞便中的某些 DNA 標記物和血液來篩查年齡在 45 歲及以上的成人，這一年齡段的人普遍存在結直腸癌風險。如果您患有腺瘤、發炎性腸道疾病和某些遺傳性症候群，或有結直腸癌的個人或家族史，請勿使用。Cologuard 不能替代結腸鏡檢查，高危患者仍需做結腸鏡檢查。Cologuard 在 45-49 歲成人中的檢測效能是基於一項針對 50 歲及以上患者的大型臨床研究估計的。

應謹慎解讀 Cologuard 檢測結果。陽性檢測結果並不能確診患有癌症。檢測結果呈陽性的患者應轉診做結腸鏡檢查。陰性檢測結果並不能確診未患有癌症。檢測結果為陰性的患者若需要再次檢測請諮詢醫生。可能會出現假陽性和假陰性。一項臨床研究表明，13% 未患有癌症的患者出現陽性結果（假陽性），8% 的癌症患者出現陰性結果（假陰性）。僅憑處方銷售。

參考文獻：

1. Henley SJ, Ward EM, Scott S, et al. Annual report to the nation on the status of cancer, part I: national cancer statistics. *Cancer*. 2020;126(10):2225-2249.
2. National Cancer Institute. Genetics of colorectal cancer (PDQ®) - health professional version. 擷取日期：2022 年 9 月 26 日。 <https://www.cancer.gov/types/colorectal/hp/colorectal-genetics-pdq>
3. Wolf AMD, Fontham ETH, Church TR, et al. Colorectal cancer screening for average-risk adults: 2018 guideline update from the American Cancer Society. *CA Cancer J Clin*. 2018;68(4):250-281.
4. National Cancer Institute. Cancer stat facts: colorectal cancer. 擷取日期：2022 年 9 月 26 日。 <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html>
5. Exact Sciences. 2022 年。《Cologuard 患者傳單》。
6. Exact Sciences. 2022 年。歸檔資料。

EXACT  
SCIENCES

 cologuard®  
by EXACT SCIENCES

EXACT SCIENCES CORPORATION  
5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719  
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard 是 Exact Sciences Corporation 的註冊商標。所有其他商標皆為其各自所有者的財產。

© 2023 Exact Sciences Corporation. 著作權所有，保留一切權利。M-US-CG-04352-TC