



Rastreio de cancro do cólon com Cologuard®

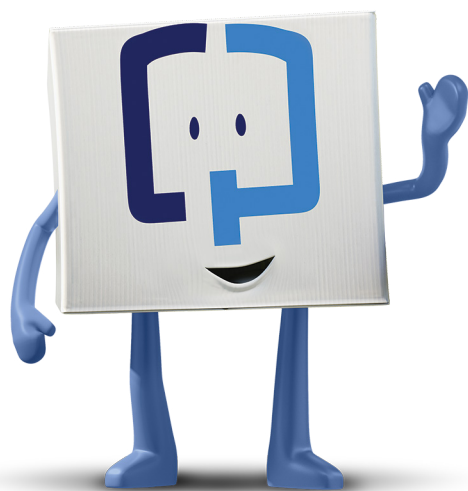


cologuard®
by EXACT SCIENCES

O Cologuard destina-se ao rastreio de adultos com 45 anos ou mais com risco médio de cancro colorretal. Rx only.

Consulte as informações importantes sobre os riscos no verso do folheto.

Assuma o controlo da sua saúde fazendo o rastreio do cancro do cólon

O cancro do cólon afeta pessoas de todas as raças, géneros e etnias¹

terceiro

Trata-se do terceiro tipo de cancro mais comum entre homens e mulheres, sendo frequentemente considerado como a forma mais evitável, mas menos prevenida^{2,5}

45+

E uma vez que o cancro do cólon está a aumentar em pessoas com idade inferior a 50 anos, a American Cancer Society recomenda começar o rastreio aos 45 anos de idade³

90%

Retenha esta linha mestra. Porque, quando detetado num estágio inicial, o cancro do cólon é tratável em cerca de 90%* das pessoas⁴


É por isso que um rastreio atempado deve fazer parte dos seus exames de saúde periódicos!

*Com base numa sobrevivência aos 5 anos.

Compreender os seus resultados

O seu profissional de saúde irá entregar-lhe o resultado cerca de 2 semanas após a receção da amostra no laboratório

Lembre-se, o Cologuard faz o rastreio de **ADN alterado** e **sangue** nas suas fezes; por isso, os seus resultados serão baseados nesses marcadores⁵

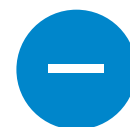

Um resultado negativo significa que o teste não detetou esses sinais potenciais. Não é provável que tenha cancro colorretal^{5,6}



Um resultado de teste positivo significa que estes sinais potenciais foram detetados. É importante saber que um resultado positivo **não** é o mesmo que um diagnóstico de cancro⁵

Falsos positivos e negativos podem ocorrer. Por isso, contacte o seu profissional de saúde para falar dos passos a seguir⁵


Gostaria de obter ainda mais informações? Visite Cologuard.com/UnderstandingResults para obter mais detalhes e visualizar os nossos vídeos

Cologuard é fácil de utilizar e tem um preço acessível

O Cologuard é coberto pela Medicare e pela maioria das grandes seguradoras. A maioria dos pacientes com seguro de saúde gasta **\$0***⁶

A nível nacional, mais de **94%** dos pacientes do Cologuard não tem quaisquer custos diretos na realização do rastreio*⁶

*Estimativa recente da Exact Sciences com base no histórico de faturação de pacientes.

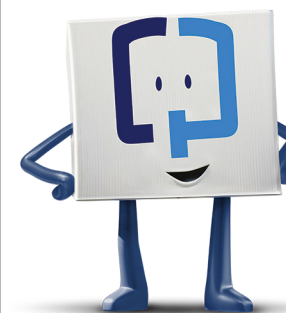

Obtenha mais informações sobre seguros de saúde visitando Cologuard.com/insurance

Podemos ajudá-lo no contacto com a sua seguradora, de forma a colocar as questões adequadas. Contacte-nos através do número **1-844-870-8870**



Destaque este lembrete para o auxiliar na devolução do seu kit Cologuard

e coloque-o num local onde geralmente mantém os seus lembretes - como, por exemplo, na sua casa de banho ou no frigorífico.



Ligue
1-844-870-8870*
ou utilize o live chat
em Cologuard.com



Visualize o vídeo
Como utilizar em
Cologuard.com/use

*Serviços de interpretação em mais de 200 idiomas

Devolva o seu kit até:



Como utilizar o seu kit Cologuard



Ao receber o seu kit, retire-o da embalagem e analise o guia para o paciente incluído



Coloque o seu recipiente de recolha no suporte da sanita



Evacue para dentro do recipiente de recolha



Raspe a sua amostra com o tubo



Adicione o conservante no recipiente de recolha



Certifique-se de que preenche as duas etiquetas



Agora, devolva simplesmente a caixa de expedição à UPS®. Consulte a página seguinte deste folheto para obter importantes informações de envio

Enviar o seu kit Cologuard

Utilize a etiqueta **pré-paga da UPS®** para devolver o kit aos laboratórios da Exact Sciences no próprio dia ou no dia a seguir à recolha

Certifique-se de que a devolução da sua recolha não é atrasada por um domingo ou feriado

Pode escolher entre duas opções de devolução sem custos:

Opção 1:

Agende um levantamento da UPS, online, em [Cologuard.com/UPS](https://www.cologuard.com/UPS) ou ligue **1-844-870-8870** para obter ajuda

Opção 2:

Entregue o kit na UPS. Visite [Cologuard.com/UPS](https://www.cologuard.com/UPS) para conhecer opções e horários locais de entrega

Indicações e informações importantes sobre os riscos

O Cologuard destina-se ao rastreio de adultos com 45 anos de idade ou mais com risco médio de cancro colorretal, ao detetar determinados marcadores de ADN e sangue nas fezes. Não utilize se já sofreu de adenomas, se sofre de doença inflamatória intestinal e de determinadas síndromes hereditárias, ou se possui histórico pessoal ou familiar de cancro colorretal. O Cologuard não substitui a colonoscopia em pacientes de alto risco. O desempenho do Cologuard em adultos de 45 a 49 anos é estimado com base num estudo clínico de larga escala com pacientes com 50 anos ou mais.

O resultado do teste Cologuard deve ser interpretado com cautela. Um resultado de teste positivo não confirma a presença de cancro. Os pacientes com resultado de teste positivo devem ser encaminhados para uma colonoscopia. Um resultado de teste negativo não confirma a ausência de cancro. Os pacientes com resultado de teste negativo devem conversar com o seu médico quanto ao agendamento do rastreio seguinte. Podem ocorrer resultados falsos positivos e falsos negativos. Num estudo clínico realizado, 13% das pessoas sem cancro receberam um resultado positivo (falso positivo) e 8% das pessoas com cancro receberam um resultado negativo (falso negativo). Rx only.

Referências:

1. Henley SJ, Ward EM, Scott S, et al. Annual report to the nation on the status of cancer, part I: national cancer statistics. *Cancer*. 2020;126(10):2225-2249. 2. National Cancer Institute. Genetics of colorectal cancer (PDQ®) - health professional version. Consultado em 26 de setembro de 2022. <https://www.cancer.gov/types/colorectal/hp/colorectal-genetics-pdq> 3. Wolf AMD, Fontham ETH, Church TR, et al. Colorectal cancer screening for average-risk adults: 2018 guideline update from the American Cancer Society. *CA Cancer J Clin*. 2018;68(4):250-281. 4. National Cancer Institute. Cancer stat facts: colorectal cancer. Consultado em 26 de setembro de 2022. <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html> 5. Exact Sciences. 2022. Cologuard Patient Brochure. 6. Exact Sciences. 2022. Dados de arquivo.

**EXACT
SCIENCES**

cologuard®
by EXACT SCIENCES

EXACT SCIENCES CORPORATION
5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard é uma marca comercial registada da Exact Sciences Corporation. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

© 2023 Exact Sciences Corporation. Todos os direitos reservados.
M-US-CG-04351-PO