


Detección del cáncer de colon con Cologuard®

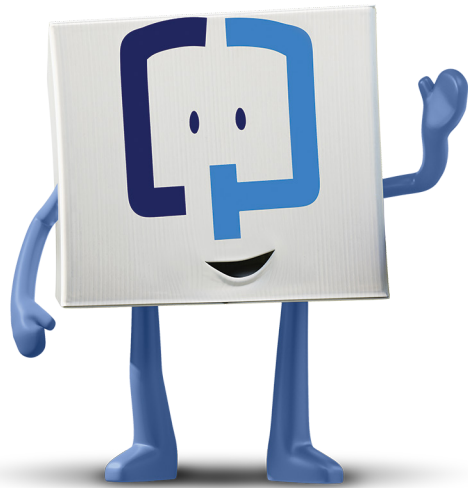


cologuard®
by EXACT SCIENCES

Cologuard está diseñado para examinar a adultos de 45 años o más que tienen un riesgo promedio de padecer cáncer de colon. Se requiere receta médica.

Consulta la Información Importante Sobre Riesgos al reverso del folleto.

Toma el control de tu salud haciéndote la prueba de detección del cáncer de colon

El cáncer de colon afecta a todas las razas, géneros y etnias.¹

- 3.er** Es el tercer tipo de cáncer más común entre hombres y mujeres, y a menudo se considera la forma de cáncer más evitable, aunque menos prevenida^{2,5}
- 45+** Y dado que el cáncer de colon está aumentando en personas menores de 50 años, la Sociedad Americana Contra el Cáncer ahora recomienda empezar a examinarse desde los 45 años³
- 90%** Recuerda esta guía. Porque cuando se detecta en etapas tempranas, el cáncer de colon es tratable en cerca del 90%* de las personas⁴

Por eso las pruebas de detección oportunas deben formar parte de los chequeos médicos periódicos.

*Basado en una tasa de supervivencia a 5 años.

Entendiendo tus resultados

Tu proveedor de atención médica te proporcionará el resultado de la prueba aproximadamente dos semanas después de que la muestra haya sido recibida en el laboratorio

Recuerda que Cologuard detecta **ADN alterado** y **sangre** en las heces, por lo que tus resultados se basarán en esos marcadores⁵

- Un resultado negativo significa que la prueba no ha detectado estos signos potenciales. Es poco probable que tengas cáncer de colon^{5,6}
- +** Un resultado positivo significa que se han detectado estos signos potenciales. Es importante saber que un resultado positivo **no** es lo mismo que un diagnóstico de cáncer⁵

Ocurren falsos positivos y negativos, así que comunícate con tu proveedor de atención médica para discutir los siguientes pasos⁵


¿Quieres más información? Visita Cologuard.com/UnderstandingResults para recibir más detalles y ver nuestros videos

Cologuard es fácil de usar y asequible

Cologuard está cubierto por Medicare y la mayoría de las principales aseguradoras. La mayoría de los pacientes asegurados pagan **\$0***⁶

Más del **94%** de los pacientes de Cologuard, a nivel nacional, se hacen la prueba de detección sin gastos de bolsillo.*⁶

*Estimación reciente de Exact Sciences basada en la facturación histórica de los pacientes.

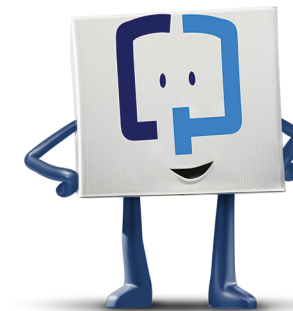

Obtén más información sobre seguros visitando Cologuard.com/insurance

Podemos ayudarte a ponerte en contacto con tu aseguradora para hacer las preguntas adecuadas. Llámanos al **1-844-870-8870**



Arranca este recordatorio para ayudarte a enviar tu kit de Cologuard

y colócalo en un lugar en el que puedas poner recordatorios, como en tu baño o nevera.



Llama al 1-844-870-8870* o chatea en vivo en Cologuard.com



Mira el video ¿Cómo se Usa? en Cologuard.com/use

*Servicios de traducción disponibles en más de 200 idiomas

Por favor, envía tu kit de recolección a más tardar:



Cómo usar tu kit de Cologuard



Una vez que recibas tu kit de recolección, ábrelo y revisa la Guía para el paciente adjunta



Coloca el recipiente de recolección de la muestra en el soporte incluido para el inodoro



Siéntate en el inodoro y evacua dentro del recipiente de recolección



Raspa tu muestra con el tubo



Añade el conservante líquido en el recipiente de recolección



Asegúrate de completar ambas etiquetas



Ahora solo tienes que enviar la caja de envío a UPS®. Consulta la siguiente página de este folleto para obtener información importante sobre el envío

Cómo enviar tu kit de Cologuard

Utiliza la etiqueta **prepagada de UPS®** para enviar tu kit de recolección a **Exact Sciences Laboratories el mismo día o el día posterior de recolectar tu muestra**

Asegúrate de que el envío de la muestra no se retrase por ser domingo o día festivo

Puedes elegir entre dos opciones de envío sin costo:

Opción 1:

Programa una recogida de UPS en línea en [Cologuard.com/UPS](https://www.cologuard.com/UPS) o llama al 1-844-870-8870 para obtener ayuda

Opción 2:

Deja tu kit de recolección en UPS. Visita [Cologuard.com/UPS](https://www.cologuard.com/UPS) para encontrar opciones locales y horarios de entrega

Indicaciones e Información Importante sobre los Riesgos

Cologuard está diseñado para examinar a adultos de 45 años o más que tienen un riesgo promedio de padecer cáncer colorrectal mediante la detección de determinados marcadores de ADN y de sangre en las heces. No lo uses si has tenido adenomas, si tienes enfermedad inflamatoria intestinal y determinados síndromes hereditarios, o antecedentes personales o familiares de cáncer colorrectal. Cologuard no reemplaza la colonoscopia en pacientes de alto riesgo. La eficacia de Cologuard en adultos de 45 a 49 años se estima en función de un gran estudio clínico en pacientes de 50 años o más.

El resultado de la prueba Cologuard debe ser interpretado con precaución. Un resultado positivo de la prueba no confirma la presencia de cáncer. Los pacientes con un resultado positivo de la prueba deben ser remitidos a una colonoscopia. Un resultado negativo de la prueba no confirma la ausencia de cáncer. Los pacientes con un resultado negativo deben consultar con su médico sobre cuándo deben volver a hacerse la prueba. Pueden producirse falso positivos y falso negativos. En un estudio clínico, el 13% de las personas sin cáncer recibieron un resultado positivo (falso positivo) y el 8% de las personas con cáncer recibieron un resultado negativo (falso negativo). Se requiere receta médica.

Referencias:

1. Henley SJ, Ward EM, Scott S, et al. Annual report to the nation on the status of cancer, part I: national cancer statistics. *Cancer*. 2020;126(10):2225-2249. 2. National Cancer Institute. Genetics of colorectal cancer (PDQ®) - health professional version. Consultado el 26 de septiembre de 2022. <https://www.cancer.gov/types/colorectal/hp/colorectal-genetics-pdq> 3. Wolf AMD, Fontham ETH, Church TR, et al. Colorectal cancer screening for average-risk adults: 2018 guideline update from the American Cancer Society. *CA Cancer J Clin*. 2018;68(4):250-281. 4. National Cancer Institute. Cancer stat facts: colorectal cancer. Consultado el 26 de septiembre de 2022. <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html> 5. Exact Sciences. 2022. Cologuard Patient Brochure. 6. Exact Sciences. 2022. Información en el archivo.

EXACT SCIENCES

cologuard®
by EXACT SCIENCES

EXACT SCIENCES CORPORATION
5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard es una marca registrada de Exact Sciences Corporation. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2023 Exact Sciences Corporation. Todos los derechos reservados.
M-US-CG-03772-SP